



ZYMO RESEARCH
The Beauty of Science is to Make Things Simple

Zymo Research [メーカー略称:ZYR]

キャンペーン期間: 2024年9月2日(月) ~ 2024年11月29日(金)

エピジェネティクス・マイクロバイオーム 関連製品 20%OFF 受託サービス 特別価格

キャンペーン




キャンペーンの詳細はWebページ番号 **71804**



EZ DNA Methylation Kit

試料DNA中の非メチル化シトシンをバイサルファイト処理によりウラシルに変換するキットです。本製品で処理したDNAをテンプレートとしてPCRを行った後、制限酵素処理、シーケンシング、マイクロアレイなどによりメチル化DNAを検出できます。

出発試料: 精製DNA

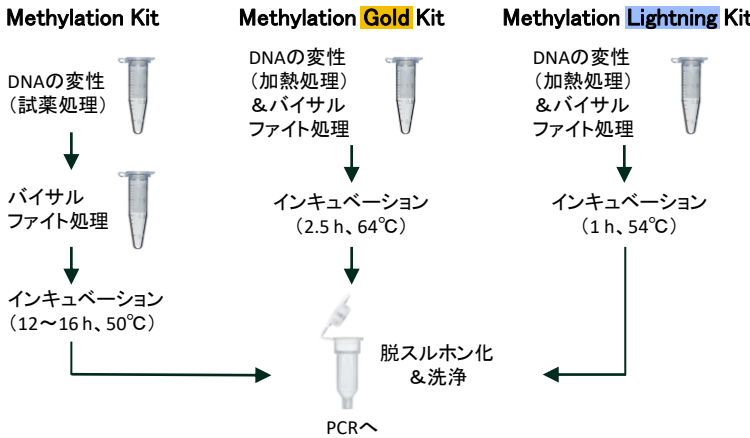

Methylation Kit
ロングセラーのバイサルファイト処理キット

Methylation Gold Kit
1ステップで、DNA変性とバイサルファイト処理が完了するキット

Methylation Lightning Kit **オススメ!**
試薬が事前調製済み (Ready-to-use) で、シリーズ最速のバイサルファイト処理キット

Zymo Research [メーカー略称:ZYR]


品名	変換効率	処理時間	試料量	精製フォーマット	溶出液量	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
EZ DNA Methylation Kit	>99%	12~16時間	500 pg~2 µg DNA	スピんカラム	≥ 10 µl	D5001	1 kit (50 reactions)	37,000	29,600
EZ DNA Methylation Gold Kit	>99%	3時間	500 pg~2 µg DNA			D5005	1 kit (50 reactions)	40,000	32,000
EZ DNA Methylation Lightning Kit	>99.5%	1.5時間	100 pg~2 µg DNA			D5030	1 kit (50 reactions)	53,000	42,400

※ 上記以外の包装品や96ウェルプレートタイプ、磁気ビーズタイプもキャンペーン対象です。詳細はフナコシWebをご覧ください。

Zymo-Seq RiboFree Total RNA Library Kit

リボソームRNA (rRNA) を除去したTotal RNAライブラリーを、バイアスなく、正確かつ短時間に調製できるキットです。独自の技術により、プローブを用いることなくrRNAを酵素的に除去します。

- 対応生物種: すべての生物種 (ヒト、マウス、ラット、植物、菌類、バクテリアを含む)
- 試料量: 10~250 ng total RNA
- 操作時間: ~85分
- 所要時間: 4~8時間 (試料量に依存)

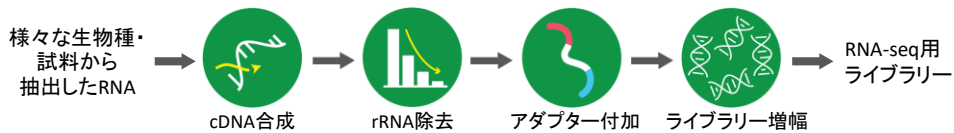

Zymo Research [メーカー略称:ZYR]


品名	商品コード	反応数	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Zymo-Seq RiboFree Total RNA Library Kit	R3000 -80°C	12 preps	1 kit	228,000	178,400
	R3003 -80°C	96 preps	1 kit	1,564,000	1,251,200

※ 別途、磁気ビーズスタンド (キャンペーン対象外) が必要です。詳細はフナコシWebをご覧ください。

裏面にもキャンペーン対象製品・受託サービス例を掲載!

ZymoBIOMICS 核酸抽出キット

様々な環境試料に含まれる細菌、原生動物、ウイルスなどの核酸を、**バイアス無く抽出**できる細菌叢解析向けのキットです。

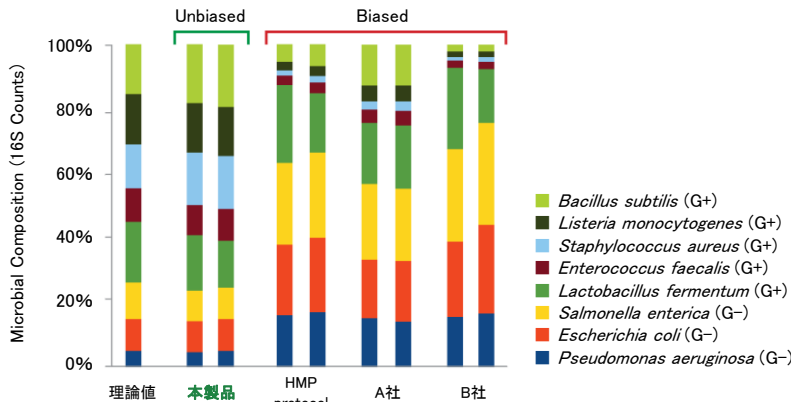

ZymoBIOMICS Microbial Community Standardを4種類の手法でDNA抽出、分析した例

4種類の抽出方法で、ZymoBIOMICS Microbial Community StandardからDNAを抽出、精製した。V3-4領域を標的とするプライマーを用いて、各DNA試料から16S rRNAを増幅し、Illumina-MiSeq(2 × 250 bp)により解析した。組成のプロファイルは、ZymoBIOMICS Microbial Community Standardに含まれる8種類の異なる細菌種の既知16S rRNA遺伝子に対する単位複製配列解析後の配列数に基づき決定した。

4種類のDNA抽出方法で、唯一本製品 (#D4300) だけが理論値に近いバイアスのないプロファイルを示した。

Zymo Research [メーカー略称: ZYR]

品名	精製フォーマット	DNA/RNA回収量	溶出液量	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
ZymoBIOMICS DNA Microprep Kit	スピナカラム	≤ 5 µg	10~20 µl	D4301	1 kit (50 preps)	68,000	54,400
ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit		≤ 25 µg	50~100 µl	D4300	1 kit (50 preps)	68,000	54,400
ZymoBIOMICS RNA Miniprep Kit		≤ 100 µg	≥ 50 µl	R2001	1 kit (50 preps)	105,000	84,000
ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit		≤ 100 µg	≥ 50 µl	R2002	1 kit (50 preps)	134,000	107,200

※ 96ウェルプレートタイプ、磁気ビーズタイプもキャンペーン対象です。詳細はフナコシWebをご覧ください。

ZymoBIOMICS Microbial Standard

NGSを用いた微生物叢およびメタゲノミクス研究における信頼性の高い標準品として有用な不活性化微生物/DNA混合物です。DNA抽出方法のバイアス評価に有用です。

Zymo Research [メーカー略称: ZYR]

品名	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Microbial Community Standard 10種類の不活性化処理済み微生物の混合物	D6300 -80°C	0.75 ml	62,000	49,600
Microbial Community DNA Standard 10種類の微生物から抽出、精製したゲノムDNAの混合物	D6305	200 ng	26,000	20,800
Gut Microbiome Standard ヒトの腸内細菌叢の存在比率を模倣した不活性化微生物(21種類)の混合物	D6331 -80°C	1 kit	86,000	68,800

Quick-16S Plus NGS Library Prep Kit (V3-V4 UDI)

リアルタイムPCRで増幅を行い、わずか30分で16S rRNA遺伝子ライブラリーを作製できるキットです。

Zymo Research [メーカー略称: ZYR]

品名	解析領域	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Quick-16S Plus NGS Library Prep Kit (V3-V4 UDI) with Primer Set 1	V3-V4	D6421-PS1*	1 kit	270,000	216,000

* 付属するインデックスプライマーの配列によって、商品コード末尾の数字(1~8)が異なります。

下記の受託サービスも特別価格で実施中！

◆ マイクロバイオームのメタゲノム解析受託サービス

16S/ショットガン 45963 完全長16S 70858 検索

ヒト由来試料(皮膚、糞便など)、環境水、土壌、食品などの幅広い試料中に存在するマイクロバイオームの遺伝子解析を行い、系統分類、同定を行う受託サービスです。

16S シークエンシングサービス

完全長16S シークエンシングサービス

ショットガンメタゲノムシークエンシングサービス

◆ エピジェネティクス解析受託サービス(RRBS、WGBS)

5391 検索

◆ Total RNA-Seq解析受託サービス

70924 検索

NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2024年9月2日現在です。
 ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
 ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
 ※ X印の製品は、毒性があるため、取り扱いに注意または厳重な注意が必要です。製品は、鍵の掛かる場所に保管して下さい。添付されているデータシートや商品ラベルをよくお読み下さい。

※ **-80°C** 印は-80°Cでの保存を必要とする製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後直ちに-80°Cのフリーザー等に保存して下さい。
 ※ 記載されている会社及び商品名は、Zymo Research社の商標または登録商標です。
 ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
 ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(ZYR)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

日本総代理店
フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp | info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: reagent@funakoshi.co.jp
TEL 03-5684-1620

受託・特注品に関して: jutaku@funakoshi.co.jp
TEL 03-5684-1645

funakoshi



@Funakoshi_CoLtd



/フナコシ株式会社

ZYR-7792 (2024.09)