

20% OFF

Maelstrom Switch 8


磁気ビーズ式自動核酸抽出装置

ギアボックス (別売、下記参照)

スピントップの回転運動と、磁気ロッドによる磁気ビーズの回収を行うユニットです。ギアボックスを交換することで1回のRunで処理する試料数・容量を変更できます。

※Maelstrom Switch 8 本体だけでは使用できません。ギアボックスを必ずお買い求め下さい。

7インチタッチスクリーン

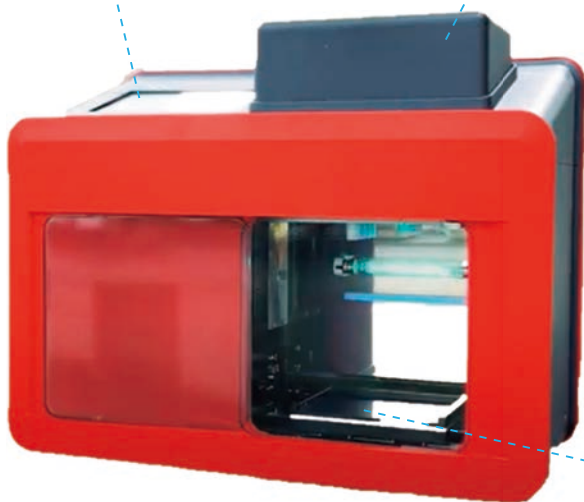

ギアボックスを本体にセット



Heating Block をヒーターユニットに装着して使用します

独立型ヒーター

特許取得済みの TANBead スピン技術

Spin tip の回転で激しく溶液を攪拌

磁気ロッド

磁気ビーズ

52.4<sup>W</sup>×26.5<sup>D</sup>×41.2<sup>H</sup> cm, 16.5 kg




- 独自のスピン技術と強力な磁気ロッドで、試料と磁気ビーズを回転 (攪拌) させ、高収量・高純度に核酸を抽出します。
- 試料と核酸抽出試薬の混合から核酸の溶出まで、すべての操作を自動化できます。

[メーカー: TAN]

1回のRunで処理できる試料数	4 / 8 / 16 (セットするギアボックスにより異なる)
磁気ロッドの回転数	500~3,000 rpm
磁気ロッドの磁束密度	少量の試料を処理時: >3,900G 多量の試料を処理時: >4,700G
電源	100~240 V, 1.1~2.3A, 50/60 Hz
商品コード	088.M07RU.00A <span style="color:red">△</span>
包装	1 unit
通常価格 (¥)	<del>2,000,000</del>
キャンペーン価格 (¥)	1,600,000

別売品 ギアボックス 20% OFF

[メーカー: TAN]

品名	4 gearbox	8 gearbox	8+ gearbox
対応するプレート・チューブ	24 ディープウェルプレート	96 ディープウェルプレート 6-Tube B (専用 Auto チューブ)	96 ディープウェルプレート 6-Tube B (専用 Auto チューブ)
製品の的外観	 24 Heating Block 付属	 96 Heating Block 付属	 96 Heating Block 付属
1回のRunで処理できる試料数	4	8	16
処理容量	0.1~9 ml	0.05~1.2 ml	0.05~1.2 ml
商品コード	089.M0700.001	089.M0701.001	089.M0702.001
包装	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	<del>250,000</del>	<del>250,000</del>	<del>350,000</del>
キャンペーン価格 (¥)	200,000	200,000	280,000

期間  
2024年  
11/15  
▼  
2025年  
2/28

価格・内容は発刊日現在です  
掲載品はすべて研究用です