



## デザイン済み siRNA ライブラリー

# siRNA Screening Library

キャンペーン実施中

 コレクションライブラリー ~2021 年 12 月 24 日  
 Cherry-pick カスタムライブラリー ~2021 年 12 月 31 日

デザイン済み siRNA をプレートに分注した製品です。組み合わせ済みコレクションライブラリーと Cherry-pick カスタムライブラリーがあります。細胞内パスウェイの解析/遺伝子の機能解析/創薬ターゲット分子の探索などに最適です。

### コレクションライブラリー

特別価格

デザイン済み siRNA をプレートに分注したライブラリーです。SMARTpool と Set of 4 の 2 種類のフォーマットがあります。

#### ■ siGENOME siRNA

・ノックダウン効果と特異性に優れたスタンダードタイプです。

#### ■ ON-TARGETplus siRNA

・高いノックダウン効果と共に、センス・アンチセンス両鎖への化学修飾により、両鎖に由来するオフターゲット効果を低減しています。

#### ■ Accell siRNA

・リポフェクション法では siRNA 導入が難しい細胞や、トランスフェクション試薬への感受性が高い細胞における siRNA 実験に最適です。

#### ■ Lincode siRNA

・長鎖 Non-coding RNA の効率的なノックダウンを実現できます。

※12/24 (金) ご依頼分まで特別価格で販売いたします。

詳細は、当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。

### Cherry-pick カスタムライブラリー

20% OFF

Cherry-pick Custom Library Tool を使用して、ヒト・マウス遺伝子をターゲットとするデザイン済み siRNA を、最少 20 ウェル~96 ウェルプレートにレイアウトできます (384 ウェルプレートの場合、最少 40 ウェル~)。

小容量包装のため、コストを抑えた siRNA 実験が可能です。

※製品ラインナップの詳細は、Web ページ番号 : 67905 をご覧ください。

### ご注文方法

Horizon 社 Dharmacon 製品はお客様ご自身でオンライン注文していただきます。詳細は当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。 [メーカー : DHA]

製品は Horizon 社の Web サイトにてオンラインでご注文いただけます。ご注文にはユーザー登録が必要です。

初めてご注文されるお客様は、事前に登録をお願いいたします。

ご注文方法の詳細はこちら

81062



30% OFF

Web ページ番号

81594



## セルフリー長鎖 DNA 合成ツール

# OriCiro® Cell-Free Cloning System




キャンペーン実施中 : ~2022 年 2 月 28 日

OriCiro® Cell-Free Cloning System は多断片 DNA の同時連結法 (OriCiro® Assembly) と、大腸菌のゲノム複製に関わる 26 種類のタンパク質を試験管内で再構築した長鎖環状 DNA 増幅法 (OriCiro® Amp) を組み合わせた**世界初の無細胞長鎖環状 DNA 合成ツール**です。本技術により従来の大腸菌を用いた DNA クローニングに要する日数や手間、制限などの問題を劇的に改善します。

### OriCiro® Assembly

DNA 断片 1 ステップ連結反応

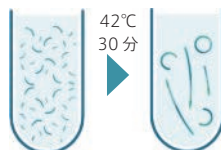

精製なして  
増幅反応へ!


Web に  
動画あり

(連結)

- 等温酵素反応により、効率的に DNA を連結
- 50 個までの DNA 断片を一度に設計通り正しく同時連結

### OriCiro® Amp

等温酵素反応 6 時間~一晩 環状 DNA の 指数関数的な増幅

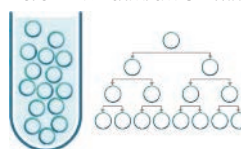

(増幅)

- 新たな反応液に継代して何世代も増幅を継続できる
- 増幅産物は、大腸菌への形質転換が可能
- GC リッチやリピート配列、細胞毒性のある配列も増幅可能

※保存条件 : -80°C

[メーカー : ORC]

ご所属	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
<b>OriCiro® Cell-Free Cloning System (連結 5 反応+増幅 10 反応)</b>				
非営利団体 (大学・公的機関)	MS0011-A	1 kit	50,000	35,000
営利団体 (企業)	MS0011-P	1 kit	150,000	105,000
<b>OriCiro® Amp Kit (増幅 10 反応)</b>				
非営利団体 (大学・公的機関)	MS0021-A	1 kit	45,000	31,500
営利団体 (企業)	MS0021-P	1 kit	135,000	94,500

### ご購入時のご注意

初回購入時のみ、メーカーサイト上で同意が必要です。フナコシ Web で製品を検索いただき、価格表中の書類リンクをクリックすると表示される「同意書ページ」から同意の送信ができます。