

20%
OFF



Web ページ番号

4644



混合や計量は不要！1 滴加えるだけ

EtBr 溶液

50 ml のバッファーまたはゲルに 1 滴 (約 40 μ l) 加えるだけで、最終濃度 0.5 μ g/ml のエチジウムブロマイド (EtBr) 溶液を調製できます。



[メーカー：GLP]


品 名	Ethidium Bromide Dropper Bottle
商品コード	20-276
包 装	10 ml
通常価格 (¥)	14,000
キャンペーン価格 (¥)	11,200

スマホ用 ゲル撮影フード

キャンペーン対象外

お手持ちのスマートフォン、トランスイルミネーターと組み合わせることで、手軽に観察や撮影ができます。

ここにスマートフォンのカメラをセット

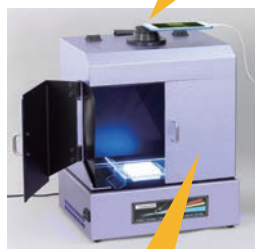

- ・上ボタンを開けて観察も簡単
- ・LED 使用時に便利なオレンジフィルター付き

お手持ちのイルミネーターの上にフードをセット

取り付けできる スマートフォンの幅	5.7~10.5 cm
ボックスの外寸	280 ^W ×210 ^D ×280 ^H mm (カメラ取り付けマウントを除く)

[メーカー：MEC]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FBOX-GS-SET	1 set	174,000	キャンペーン対象外

※トランスイルミネーターは別売です。

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

Web ページ番号

71713



20%
OFF



Web ページ番号

1254



使用済み EtBr 溶液を安全に処理

染色試薬の吸着除去バッグ


EtBr や Coomassie Blue などの染色剤を一晩で除去できる、ディスポーザブルタイプの吸着除去バッグです。



Destaining Bag を Activation solution (5 ml) で湿らせてから、EtBr などの染色試薬が含まれている溶液に投入、一晩放置します。

バッグ 1 個あたりの最大吸着容量はエチジウム 5 mg です (0.5 μ g / ml の EtBr 溶液 10 L 分)。

※使用後は、施設・地域で定められた方法に従い、不燃物として処分して下さい。

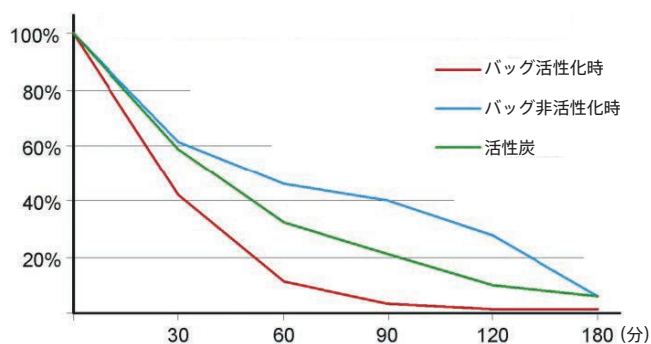

EtBr 溶液の吸光度 (A285) の変化

活性化したバッグの吸着率が最も優れていることが分かる。

[メーカー：GLP]

品 名	Destaining Bag, with Activation Solution (25 bags)
商品コード	20-277
包 装	1 set
通常価格 (¥)	39,000
キャンペーン価格 (¥)	31,200